

Hose system

КТ и МРТ-инжекторы для введения контрастного вещества
Надёжно и просто – особенная система трубок

Contrast agent injectors for CT/MRI
Safe and easy – the particular hose system



ulrich medical CONTRAST AGENT INJECTORS FOR CT/MRI

Надёжность и лёгкость в использовании Safe and user-friendly

Система трубок, состоящая из двух частей и подходящая для всех инжекторов поколений XD 200x, включает в себя:


- Трубку насоса: используется в течении 24 часа для любого количества инъекций
- Трубку пациента: используется для любого количества инъекций, вводимых одному пациенту, смена и выброс после каждого пациента

- Доказанная гигиеническая безопасность
- Экономичное использование расходного материала
- Лёгкость в управлении аппаратом
- Быстрая смена пациента
- Сокращение места для склада расходного материала

Two-part hose system for all injectors of the XD 200x family consisting of:

- **Pump hose:** Use **up to 24 hours for any number of injections**
- **Patient hose:** Use **for any number of injections for one patient**, change and disposal **after each patient**

- Proven hygienic safety
- Economic consumption of disposables
- Easy handling
- Fast patient changeover
- Reduced stock-keeping of disposables

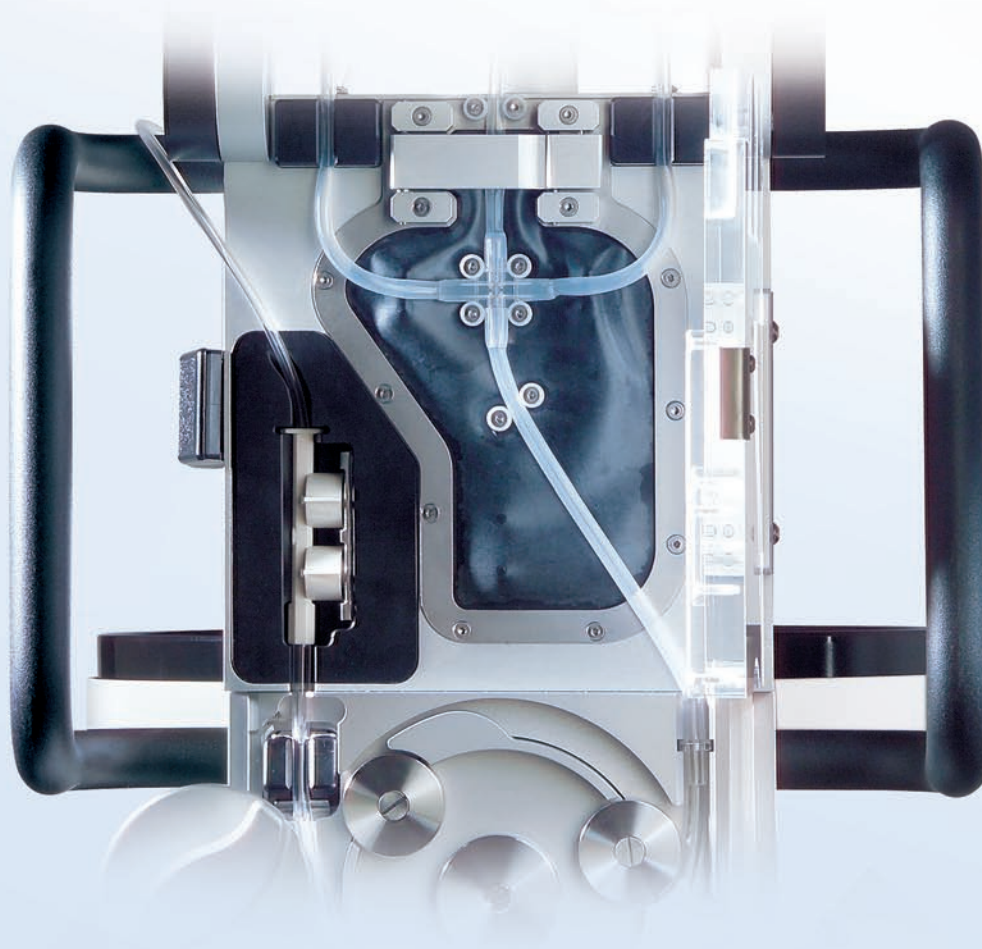

Система трубок – краткая характеристика

The hose system – At a glance

	Трубка пациента	Трубка насоса
Расход	1 трубка на одного пациента	1 трубка на один рабочий день (до 24 часов максимум)
Длина	4 варианта длины (120, 150, 250, 320 см)	Одна длина
Особенности	<ul style="list-style-type: none"> ■ 2 клапана, предотвращающих обратный ток жидкости ■ Проверена на прочность по выдерживанию давления ■ Проверена на совместимость с КВ ■ Апиrogenная ■ Без латекса 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 3 подключения для флаконов, каждое имеет фильтр для воздуха ■ Специальный фильтр для мелких частиц ■ Встроенная система контроля давления ■ Проверена на прочность по выдерживанию давления ■ Проверена на совместимость с КВ ■ Апиrogenная ■ Без латекса

	Patient hose	Pump hose
Consumption	1 hose per patient	1 hose per working day (max. 24 h)
Length(s)	4 lengths (120, 150, 250, 320 cm)	1 length
Specials	<ul style="list-style-type: none"> ■ 2 check valves ■ Proven resistance to pressure ■ Proven CA compatibility ■ Non-pyrogenic ■ Latex-free 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 3 accesses for reservoir containers, each with air filter ■ Particle filter ■ Integrated pressure control unit ■ Proven resistance to pressure ■ Proven CA compatibility ■ Non-pyrogenic ■ Latex-free





Наши координаты
Please contact

CE 0123

Ulrich
medical

Ulrich GmbH & Co. KG | Buchbrunnenweg 12 | 89081 Ulm | Germany
Phone: +49 731 9654-234 | Fax: +49 731 9654-2706
E-Mail: injector@ulrichmedical.com | Internet: www.ulrichmedical.com